




Re-Strainer 200µm

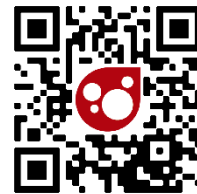

元件說明

目錄編號	總數量	狀態	包數
43-75200-40	5 袋	滅菌	5 袋(每袋 4 Pcs)

Re-Strainer 設計為過濾或濃縮大量液體中的粒子，並能收集可回收指定顆粒大小之粒子。兩個附蓋的 Luer-Lock 可自由引流 6ml 的回收液體。可將多個不同型號的 Re-Strainer 串聯成爲一個聯級篩檢程式 (使用公對公轉接器)，或是用 Luer-Lock 接頭轉接器

- 適用於大容量樣品的過濾
- 多層級分層過濾
- 指定尺寸顆粒分級
- 去除較小的雜質
- 濃縮大量稀有顆粒
- 用於 affinity 色譜凝膠的小柱

規格細節

篩檢程式	棕色-透明色
生產批號	請見標籤(包裝印刷)
篩網材質	PET 製成的精密編織網，以射出成形的固定於外殼上，以確保其工作強度及穩定性。
外殼材質	LE-PD 低密度聚乙烯
是否無菌	是
化學穩定性	對非氧化性酸和堿具有良好的耐受性，脂肪，大多數有機溶劑
運輸條件	常溫運輸
儲藏條件	乾燥，室溫。

警告與限制:本產品僅用於研究和開發，不得用於診斷或治療用途。